

Zonulina en Heces

EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD INTESTINAL

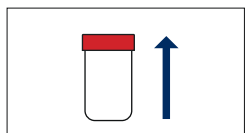
Contenido del kit	nº Análisis
1 Dispositivo de recogida de heces 1 Papel de recogida de heces 1 Documento de instrucciones de uso F02356 1 Documento de solicitud de análisis (debidamente cumplimentado)	

LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS AL KIT ANTES DE LA TOMA DE MUESTRA

**1**

Lávese las manos.

Abra el kit y saque el dispositivo de recogida de heces y el papel para cubrir el WC.

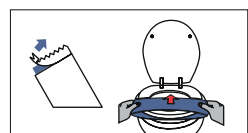
**2**

Coloque el recipiente estéril en posición vertical.

**3**

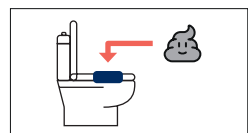
Vacíe su vejiga antes de empezar con la recogida.

Es importante que la recogida de la muestra se haga sin orina ni agua del inodoro porque interfieren negativamente en los resultados de los análisis.

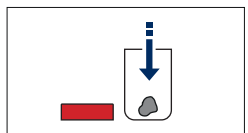
**4**

Coloque el papel en el WC para la recogida de heces.

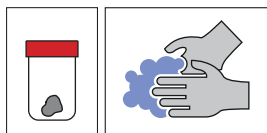
Nota: El método de recolección de la muestra de heces debe prevenir que las heces caigan en el agua del inodoro para evitar la contaminación de la muestra.

**5**

Siéntese en el WC sobre el papel colocado y defeca sobre él.

**6**

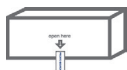
Recoja una muestra de heces del tamaño de una nuez y colóquela en el recipiente estéril.

**7**

Cierre el recipiente y deseche las el resto de las heces junto con el papel en el inodoro tirando de la cadena. Lávese bien las manos.

**8**

Conserve el recipiente con la muestra en la nevera durante un periodo máximo de 4 días.

**9**

Introduzca la muestra en el kit junto al documento de solicitud de datos y consentimiento informado. Cierre el kit e introdúzcalo en el sobre facilitado de GLS para hacerlo llegar al Laboratorio.

**10**

Para realizar la devolución del kit, deberá localizar el correo electrónico correspondiente a la entrega del paquete. En dicho correo encontrará un botón con la opción **“Solicitud de recogida”**. Al seleccionarlo, se abrirá un formulario que deberá cumplimentar para activar la devolución de la muestra. Una vez completado el proceso, la empresa de mensajería GLS acudirá a su domicilio para recoger el paquete.

*** La recogida se programa automáticamente para el día siguiente a la solicitud (no es posible gestionarla para el mismo día). Por este motivo, recomendamos solicitar la recogida el día previo a la extracción de la muestra, para que el kit pueda ser recogido el mismo día de la extracción.**

**11**

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: **laboratorioechevarne.com**